


Sterifilt

Le Sterifilt[®] est **le premier filtre antibactérien développé exclusivement pour la réduction des risques** liés à l'injection de drogues.

Le Sterifilt[®] offre **le plus haut niveau de filtration** au plus grand nombre d'utilisateurs. _____


Cette innovation répond à trois objectifs :

- 1.** Éliminer les bactéries et les champignons.
- 2.** Éliminer les particules insolubles.
- 3.** Filtrer rapidement et facilement en une seule étape.

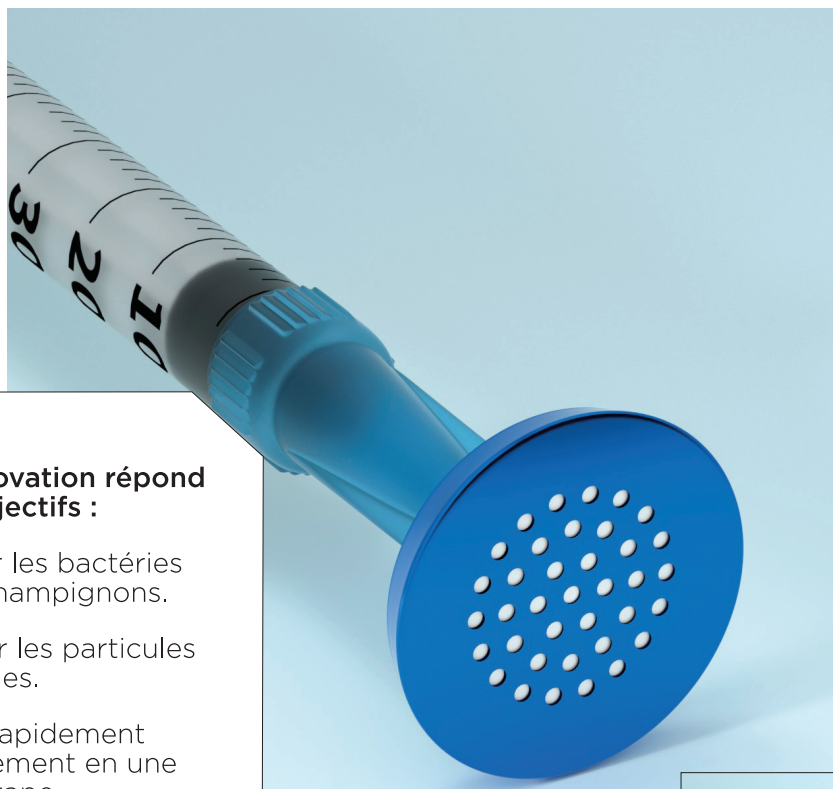


Solution filtrée contenant la substance active

Membrane et grille de protection
Solution non filtrée

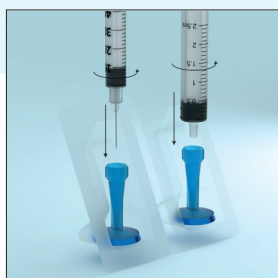

**LE STERIFILT[®] EST
UNIVERSEL,
STÉRILE ET
À USAGE UNIQUE**

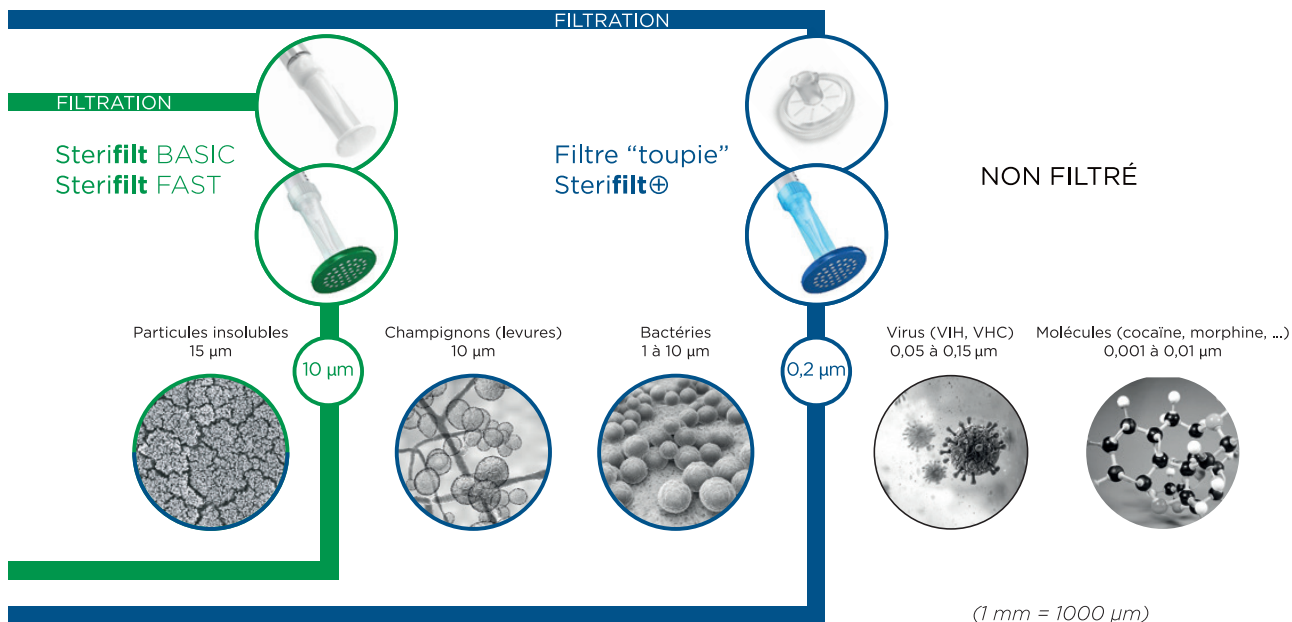

ÉLIMINATION DES BACTÉRIES ET DES CHAMPIGNONS

- Le mélange préparé pour l'injection peut être contaminé par des **micro-organismes** vivants : bactéries et champignons. Cette contamination peut provenir de différentes sources :
 - contamination du mélange par des **maines souillées**,
 - **outils** de préparation **ou eau non stériles**,
 - drogue elle-même contaminée.
- Quand ces micro-organismes sont injectés, ils peuvent atteindre différents organes (sepsis), causer des **infections** potentiellement graves, notamment au niveau des poumons, des os, du cerveau et du cœur.
- Le Sterifilt® est muni d'une membrane antibactérienne de **0,22 µm** qui retient plus de **99,9% des bactéries et des champignons**.

1

2

ÉLIMINATION DES PARTICULES INSOLUBLES

- Comme les Sterifilt BASIC et FAST, le Sterifilt® élimine la quasi-totalité des particules insolubles : **agents de coupe** des drogues de rue et **excipients** des médicaments.
- Plusieurs complications sont associées à l'injection de ces particules, notamment au point d'injection (abcès, ulcères). Après injection, certaines de ces particules restées intactes circulent dans le sang et peuvent **bloquer les vaisseaux** les plus fins, par exemple au niveau des capillaires pulmonaires où elle sont susceptibles de s'accumuler.

3

LE SEUL FILTRE ANTIBACTÉRIEN CONÇU POUR LES PERSONNES QUI INJECTENT DES DROGUES

- Le Sterifilt® permet de filtrer rapidement et **en une seule étape**.
- Il **s'adapte à toutes les seringues** sans aiguille et à la plupart des seringues à aiguille sertie, à espace mort faible. Ces dernières réduisent le risque de transmission virale en cas d'échange ou de partage accidentel.
- Il permet de **filtrer rapidement les poudres et les médicaments**.
- Il n'élimine pas les molécules actives et **n'altère pas l'effet recherché de l'injection**.
- Une étude menée en 2020-2021 dans huit CAARUDs a démontré la bonne acceptabilité du Sterifilt® par les usagers.

RÉDUIRE LES RISQUES

LA FILTRATION ANTIBACTÉRIENNE... UN GESTE INDISPENSABLE MAIS PAS SUFFISANT !

- La majorité des **infections** bactériennes ou fongiques liées à l'injection de drogues est due aux bactéries et champignons présents **sur la peau et dans la bouche**.
- En complément de l'utilisation du Sterifilt®, il faut **utiliser du matériel stérile, se laver les mains, désinfecter le site d'injection et ne pas lécher l'aiguille**.

AUCUN FILTRE N'ÉLIMINE LES VIRUS : LA SEULE FAÇON D'ÉVITER LES TRANSMISSIONS VIRALES EST DE NE JAMAIS PARTAGER SON MATÉRIEL.